




ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАРДИОКОМПЛЕКС

ECG Dongle Full

Кардиофлешка
Мобильное приложение
Облачный сервис

12-канальный прибор
для профессионального
использования

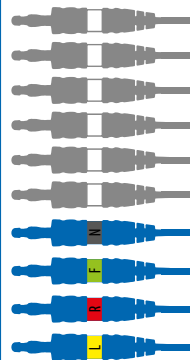

Получить полную информацию о приборе ECG Dongle Full и сервисе «КардиоОблако»

Купить прибор ECG Dongle Full и расходные материалы

Получить сервисную поддержку

www.cardio-cloud.ru

8 800 350-98-92

Ваш личный врач:

ID личного врача:



г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
+7 499 130-98-92

Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4
+7 499 608-01-88

1

Загрузите и установите приложение «ECG Dongle»

Скачайте и установите бесплатное приложение на свое мобильное устройство с официального сервиса Google Play или App Store.

2

Прикрепите электроды к проводам, зафиксируйте их на теле

Установите электроды на теле, руководствуясь цветовыми обозначениями.

3

Подключите ECG Dongle Full к мобильному устройству

Подключите прибор к разъему мобильного устройства с помощью OTG-кабеля или непосредственно в разъем USB, если он есть.



App
Store

Google
Play



4

Проведите исследование
Примите удобное положение, расслабьтесь, дождитесь стабилизации изолинии сигнала на экране.
Запустите приложение и следуйте инструкции на экране.

5

Отправьте исследование на облачный сервис или сохраните в pdf

На облачном сервисе «КардиоОблако» врач исследует заявку и выдаст свое мнение о состоянии вашей сердечно-сосудистой системы.

КардиоОблако

www.cardio-cloud.ru

